

## NÁVOD K OBSLUZE MASÁŽNÍHO LEHÁTKA



### VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

- krabici opatrně otevřete, aby nedošlo k poškození vnitřních částí, malé části doporučujeme umístit do malé nádoby, aby se neztratily
- zkontrolujte, že balení obsahuje všechny části a žádná z nich není poškozená
- pokud lehátko sestavíte s vadnou součástí a poté dojde k poškození lehátka, není na něj možné uplatnit záruku
- lehátko nikdy nezatěžujte větší vahou, než je doporučeno v popisu produktu
- na lehátko nikdy neposkakujte a podobně, mohlo by dojít k jeho destabilizaci a poškození
- lehátko vždy využívejte pouze k účelu, k jakému bylo určeno – tedy jako přenosné masážní lehátko
- pravidelně kontrolujte, že lanka nejsou opotřebované a šroubky jsou dostatečně utažené
- na čištění plochy nepoužívejte čističe na bázi alkoholu, které by mohli poškodit povrch, na čištění používejte pouze slabou mýdlovou vodu, měkký hadřík a poté plochu otřete suchým hadříkem
- před zatížením lehátka se ujistěte, že všechny 4 nohy stojí pevně, jsou rovné a horní povrch je všude ve stejné výšce
-

## POSTP MONTÁŽE:

**KROK 1.:** Otevřete opatrně krabici a obsah umístěte na stranu lůžka, jak je znázorněno na obrázku.




**KROK 2.:** Otočte šroubky o 1/2 jak je vidět na obrázku 1. Poté přišroubujte zbývajících 7 šroubků (celkem jich je v balení 8 ks). Poté připevněte panty, jak je znázorněno na dalším obrázku.



### UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme, že je nezbytné při upevňování pantů držet lehátko sklopené v úhlu 90° (přesně jak je na obrázku)

**KROK 3.:** Pod správným úhlem (viz obrázek) upevněte ke stolu lanka. Poté lehátko položte na zem a ujistěte se, že lanka jsou umístěna ve správných pravoúhlých úhlech.

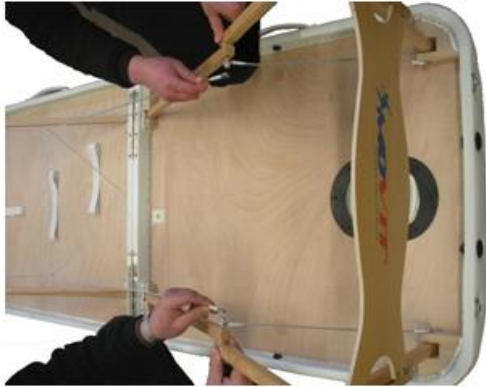

### SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ LEHÁTKA:



### POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**OPĚRKA HLAVY** – opěrka hlavy má tvar půlměsíce, opěrku lze snadno nastavit do pohodlné výšky a úhlu sklonu pomocí rukojeti



**NASTAVITELNÁ LOKETNÍ OPĚRKA** – jedná se o užitečné zařízení pro oporu loktů během masáže. Opěrku upevněte dle obrázku a poté upravte popruh do té správné polohy.



**BOČNÍ OPĚRKA** – přídatná opěrka, která zapadá do otvorů po stranách lehátka

**NASTAVENÍ VÝŠKY** – správná výška stolu je závislá na velikosti maséra a masážní techniky.

## **PÉČE O LEHÁTKO:**

- denní péče: odstraňte nečistoty, nachytané přes den jemnou mýdlovou vodou a osušte měkkým hadříkem bez chloupků
- dezinfekce: dezinfikujte povrch podle potřeby desinfekčními prostředky na bázi isopropanolu
- odstranění nečistot: menší skvrny lze odstranit neabrazivním čistícím prostředkem, poté důkladně opláchněte vodou a osušte hadříkem, větší skvrny budou vyžadovat profesionální úklid
- masážní stůl udržujte v suchém prostředí!